



Sapphire

Siluet 1060

Siluet 1060

Siluet aplica el laser diodo de 1060nm de longitud de onda con 4 piezas de mano para tratar la piel con la energía termal de 42°C a 47°C. Con esta temperatura constante traumatiza las células de grasa subcutánea y reduce la grasa del cuerpo de manera no invasiva. Siluet cuenta con varios aplicadores y 4 piezas de mano para tratar múltiples partes del cuerpo al mismo tiempo.

Particularidades

- ◆ Varios aplicadores para facilitar el tratamiento de múltiples áreas
- ◆ 4 piezas de mano
- ◆ Refrigeración por contacto
- ◆ Tratamiento durante 25 minutos

Indicaciones



Mecanismo de Apoptosis

La energía de laser diodo de 1060nm aplicada a la parte del tratamiento genera un calor de entre 42°C a 47°C. Las células de grasa tratadas con la energía termal (de 42°C a 47°C) mueren por si mismas y se eliminan mediante el metabolismo del cuerpo gradualmente. De esta manera Siluet induce 'Apoptosis'.

Sistema no invasivo de lipólisis con laser diodo de 1060nm

Tratamiento no invasivo

No daña la superficie de la piel

No necesita tiempo de recuperación

Trata el abdomen y flancos al mismo tiempo

DI ADIÓS A LA GRASA



VS

Siluet

(Dispositivo de escultura-caliente)

- ◆ 1060nm de láser diodo.
- ◆ 42 a 47 grados de temperatura.
- ◆ Duración del tratamiento: 25 minutos.
- ◆ Ajusta las áreas del tratamiento por los marcos versátiles del aplicador y sus cuatro piezas.
- ◆ Se trata de una utilización simple. Manos libres.
- ◆ La piel no sufrirá ningún daño gracias al enfriamiento superior de contacto.

Dispositivo de escultura-Frío

- ◆ Reducción de grasa congelante.
- ◆ -9 grados de temperatura.
- ◆ Duración de tratamiento: 1 hora
- ◆ Tratamiento para una sola zona específica.
- ◆ Puede producir edema en la zona tratada.

Características


- ◆ Lipólisis con temperatura de 42-47 grados.
- ◆ Cuatro aplicadores láser (1060).
- ◆ Trata múltiples áreas con sus prácticos aplicadores.
- ◆ Solo 25 minutos de tratamiento.

Indicaciones

- ◆ Obesidad.
- ◆ Abdomen.
- ◆ Costados.
- ◆ Muslos.

Técnicas específicas

- ◆ Potencia: **1060±20nm.**
- ◆ Fuente del láser: **Láser diodo.**
- ◆ Anchura del pulsador: **CW (onda continua).**
- ◆ Salida de energía: **50W por 4 piezas / 50W por diodo (Total 200W).**
- ◆ Energía: **Máx. 1.5W/cm cuadrado.**
- ◆ Área de tratamiento: **4x6 cm².**
- ◆ Electricidad requerida: **100-240v,**
- ◆ **50-60 Hz**

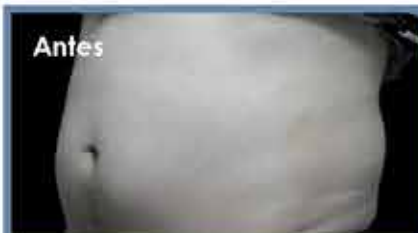

8 semanas después del tratamiento con Siluet
Area de tratamiento : flancos y abdomen superior & inferior

10 semanas después del tratamiento con Siluet
flancos, abdomen superior & inferior



ALGO MÁS QUE
Una **EMPRESA**

calidad



confianza



seguridad



Contacto:

www.SapphireGroup.es

www.LaserSapphire.es

Pol. Ind. El Carrascal
C/ Etileno nº2

47012 Valladolid · SPAIN

hablemos@lasersapphire.es

900 103 260